


## フローテスト

IDDSIの液体のレベルは10秒後にシリンジに残った試料の残留量によって決まります。

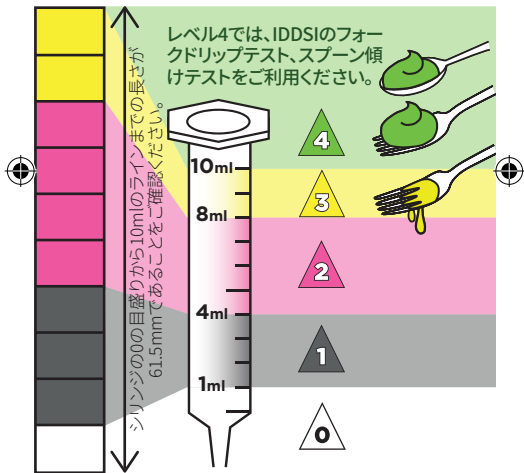

© IDDSI 2020

1. シリンジからピ  
ストン棒ははず  
します。



2. 筒口を指で押さ  
え10mlのメモ  
リまで試料を満  
たします。




3. 指を筒口から離す  
と同時に、ストップ  
ウォッチをスタート  
させます。



IDDSIのレベルを  
確認します。

4. 10秒後に指を筒  
口に戻し、試料が  
流れ落ちるのを止  
めます。

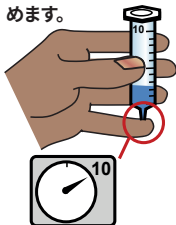

© IDDSI 2023